

# Omron M7 Intelli IT / X7 Smart Handleiding van de specialist




<b>1. Batterijen plaatsen / vervangen</b> .....	3
<b>2. Datum en Tijd instellen</b> .....	4
<b>3. Het geheugen</b> .....	5
3.1 Het geheugen bekijken .....	5
3.2 De ochtend- en avondweekgemiddelde bekijken .....	6
3.3 Gemiddelde laatste 2 of 3 metingen uitgevoerd binnen 10 minuten. ....	6
3.4 Alle meetresultaten wissen van de huidige gebruiker.....	6
<b>4. Een 3-voudige meting uitvoeren (AFib)</b> .....	7
<b>5. Gastmodus gebruiken</b> .....	8
<b>6. Uitleg scherm en symbolen</b> .....	8
6.1 Bloeddruk, hartslag, datum en tijd .....	8
6.2 Symbolen .....	9
6.3 Vergelijksmodus .....	9
<b>7. Bluetooth</b> .....	10

## 1. Batterijen plaatsen / vervangen


De Omron M7 Intelli IT bloeddrukmeter werkt op 4 batterijen van het type AA. (Gebruik altijd 4 “nieuwe” batterijen van hetzelfde merk en type voor een goede werking)

Aan de onderkant van de bloeddrukmeter zit een klepje wat toegang geeft tot het compartiment waar de batterijen moeten komen / zitten. Open dit klepje. (Zie onderstaande afbeelding)

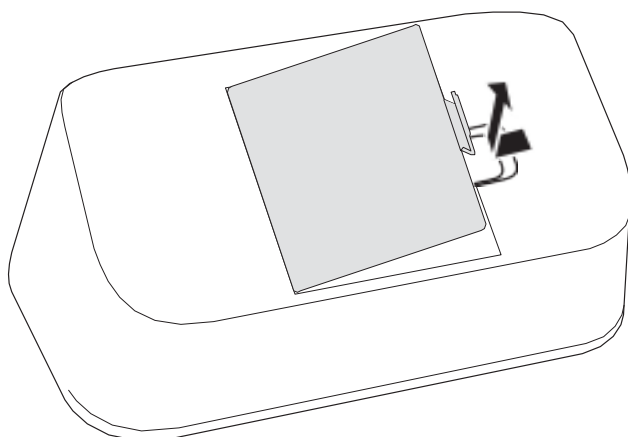


Als het klepje eraf is, plaatst u de batterijen. (Zie onderstaande afbeelding)

**LET OP:** *Let bij het plaatsen van de batterijen goed op de “+” en de “-” kant van de batterij en hoe deze in het batterijvak geplaatst moet worden.*

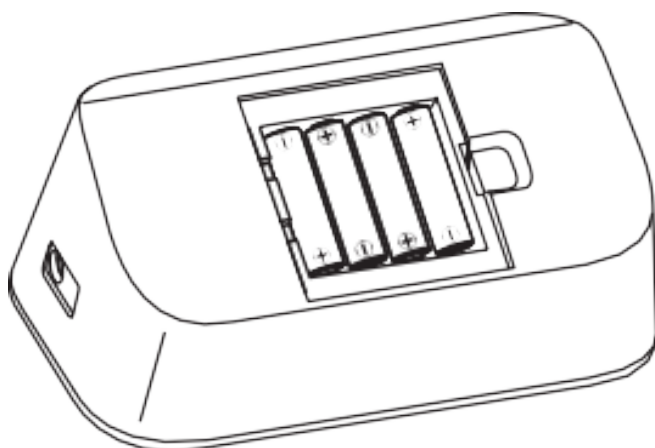




Plaats vervolgens het klepje weer terug op zijn plek en zet de bloeddrukmeter weer rechtop. Als de batterijen goed zijn geplaatst en vol zijn, ziet u op het scherm een knipperend jaartal. U kunt vervolgens de tijd in gaan stellen. (Zie volgend hoofdstuk)

## 2. Datum en Tijd instellen


Wanneer u bij het eerste gebruik de batterijen plaatst of wanneer u de batterijen vervangt, dient u de datum en tijd in te stellen. Dit is belangrijk, omdat de bloeddrukmeter bij elke bloeddrukmeting de datum en tijd vastlegt. Zo kunt u later gemakkelijk terugzien, wat uw bloeddrukwaarden waren op een bepaalde dag en tijdstip. U kunt de tijd ook handmatig instellen door op de knop aan de achterzijde van het apparaat te drukken. 

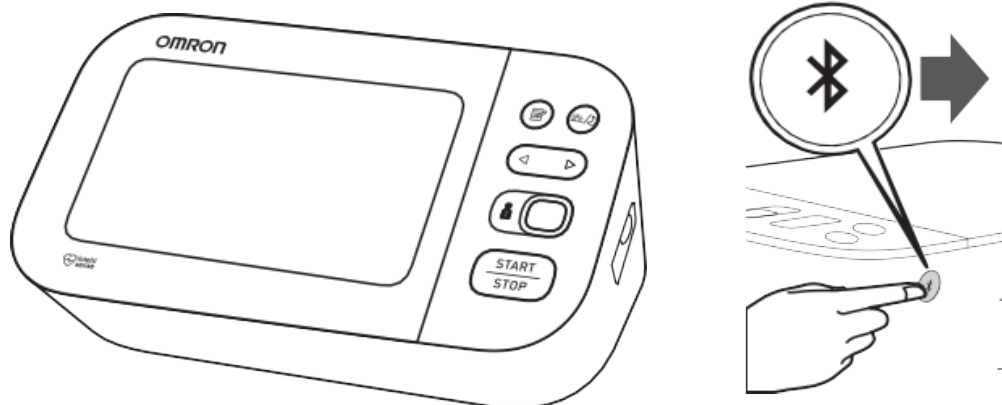Wanneer u op deze knop drukt of de batterijen plaatst, gaat er rechts bovenin een jaartal knipperen en kunt u beginnen met het instellen van de tijd.



Zoals u op de afbeelding hierboven kunt zien, heeft de Omron M7 een aantal knoppen aan de rechterzijde van het apparaat zitten. Voor het instellen van de datum en tijd maakt u alleen gebruik van de knop met de pijltjes naar links en naar rechts voor het kiezen van het jaar / maand / dag en de tijd en de knop aan de achterzijde van het apparaat om uw keuze te bevestigen, de bluetoothknop.  

Als eerste krijgt een knipperend jaartal te zien:

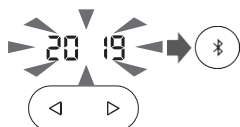

Gebruik de pijltjestoets om het juiste jaar te kiezen en bevestig dit met de bluetoothknop op de achterzijde van het apparaat. U ziet vervolgens een knipperende datum:




Als eerste stelt u met de pijltjestoets de maand in en drukt u op de bluetoothknop om dit te bevestigen. Daarna gaat de dag knipperen:



Gebruik wederom de pijltjestoets voor het instellen van de juiste dag en bevestig dit met de bluetoothknop. Als laatste krijgt u een knipperende tijd te zien:



Als eerste stelt u het juiste uur in en drukt u op de bluetoothknop om te bevestigen en vervolgens knipperen de minuten. Stel ook deze in en druk nog éénmaal op de bluetoothknop om de tijd te bevestigen. 


**De datum en tijd zijn nu ingesteld!**

### 3. Het geheugen

De Omron M7 Intelli IT heeft 2 gebruikersprofielen met elk 100 geheugenplaatsen. Persoon 1 kan dan bijvoorbeeld gebruik maken van gebruikersprofiel 1 en elke meting wordt dan opgeslagen in het geheugen. Als het geheugen van persoon 1 vol is, dus de 100 heeft bereikt, zal bij elke nieuwe meting de oudste meting worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor gebruikersprofiel 2.

#### 3.1 Het geheugen bekijken


Voordat u het geheugen gaat bekijken, moet u eerst het gewenste gebruikersprofiel kiezen:

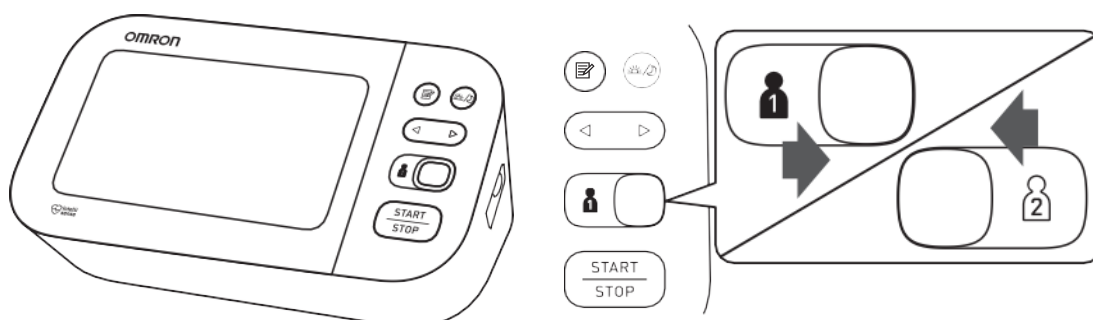


Selecteer met de schuifknop het gewenste gebruikersprofiel. (Zie afbeelding hierboven)  
Druk op de geheugenknop om de opgeslagen metingen te bekijken.



U krijgt dan de eerst opgeslagen meting te zien:

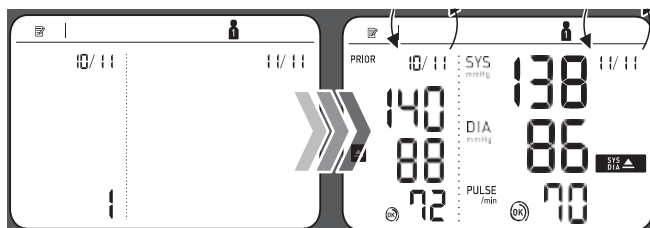

U kunt met de pijltjestoets door alle opgeslagen metingen heenlopen.

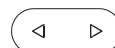

Elke keer als u op het pijltje drukt, ziet u eerst een getal en daarna de bloeddrukwaarden. Waarbij 1 de meest recente meting is. Als voorbeeld: Wanneer u op meting 1 staat en u drukt op het pijltje naar rechts, verschijnt er eerst een 2 en vervolgens de bloeddrukwaarden van meting 2. Drukt u weer op het pijltje naar rechts, dan verschijnt er een 3 en vervolgens de bloeddrukwaarden van meting 3, enzovoort.

### 3.2 De ochtend- en avondweekgemiddelde bekijken

Rechts naast de geheugenknop zit de knop voor het weekgemiddelde van de ochtend- en avondmetingen. Als u genoeg metingen heeft verricht in de ochtend en avond, kunt u het weekgemiddelde bekijken door op de volgende knop te drukken:



Het eerste overzicht dat getoond wordt, is het ochtendweekgemiddelde. (Afbeelding links) Als u nogmaals op deze knop drukt, ziet u het avondweekgemiddelde. (Afbeelding rechts)




Met de pijltjestoetsen kunt u de weekgemiddelde van de weken daarvoor bekijken. Er kunnen maximaal 7 weken aan ochtend- en avondgemiddelde worden bekeken, afhankelijk van het aantal opgeslagen metingen.

### 3.3 Gemiddelde laatste 2 of 3 metingen uitgevoerd binnen 10 minuten.

Het is met de Omron M7 Intelli IT mogelijk om het gemiddelde te berekenen van de laatste 2 of 3 metingen. Er moeten dan wel eerst 2 of 3 metingen zijn uitgevoerd binnen 10 minuten. Als u dit gedaan heeft, drukt u ongeveer 3 seconden lang op de geheugenknop:


3 sec+

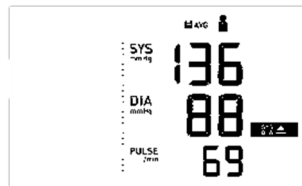

Het gemiddelde wordt getoond van de laatste 2 of 3 metingen die binnen 10 minuten zijn gedaan.


### 3.4 Alle meetresultaten wissen van de huidige gebruiker

Het is mogelijk om alle meetresultaten van 1 gebruiker te wissen. U moet hierbij goed opletten dat u de metingen van de juiste gebruiker verwijderd. Selecteer eerst het gebruikersprofiel dat u wilt wissen.

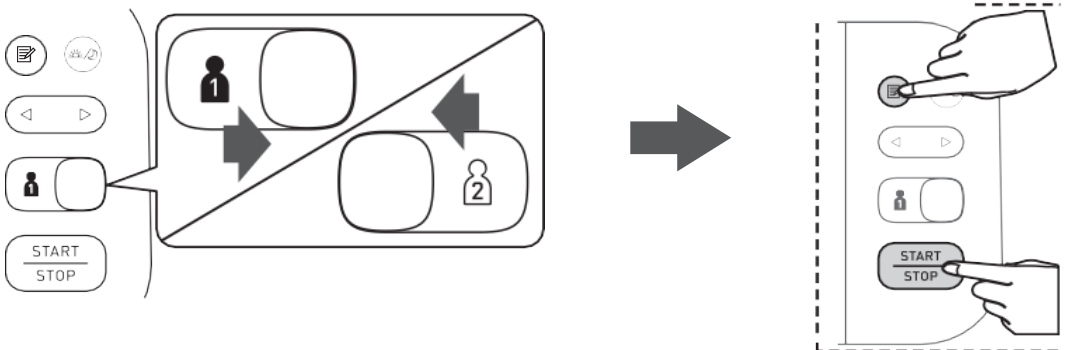


Druk vervolgens ongeveer 4 seconden lang gelijktijdig op de geheugenknop en de START / STOP knop. U ziet vervolgens een scherm met lege waarden knipperen. Als het scherm gestopt is met knipperen, kunt u de knoppen loslaten en is het geheugen gewist.


## 4. Een 3-voudige meting uitvoeren (AFib)

Met de Omron M7 Intelli IT kunt u een automatische 3-voudige meting uitvoeren, waarbij er gelijk wordt gekeken naar de aanwezigheid van atriumfibrilleren (AFib). Atriumfibrilleren of boezemfibrilleren is een onregelmatig hartritme wat een beroerte kan veroorzaken. De AFib technologie wordt daarom ook wel beroertepreventie genoemd. Indien atriumfibrillatie of boezemfibrillatie wordt gedetecteerd, zal dit worden weergegeven op het scherm met een symbool. 

Om een 3-voudige meting te starten, houdt u de START / STOP knop meer dan 2 seconden ingedrukt:

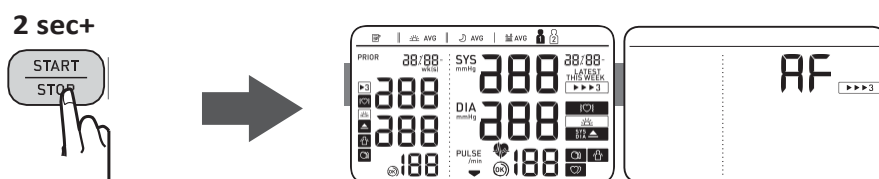

De bloeddrukmeter begint dan met het uitvoeren van 3 metingen. Tussen elke meting zit een rusttijd van 30 seconden.

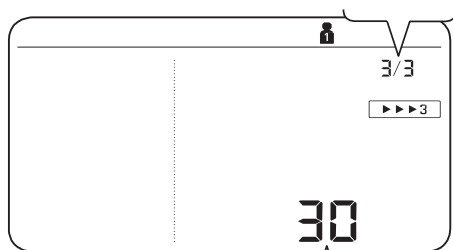

Dit is in de rusttijd te zien onderaan het scherm, waar 30 seconden afloopt naar 0. Vervolgens begint de volgende meting. Rechtsboven in het scherm kunt u zien bij welke meting u bent. Mocht 1 van de 3 metingen niet goed zijn verlopen, dan zal er automatisch een 4<sup>e</sup> meting plaatsvinden.

Als de 3-voudige meting is voltooid, krijgt u een scherm te zien met de gemiddelde waarden van deze 3 metingen. Indien boezemfibrilleren is gedetecteerd, zal dit worden weergegeven met een symbool rechts in het scherm.




## 5. Gastmodus gebruiken

Als u een meting wilt uitvoeren bij iemand anders of u wilt een meting uitvoeren zonder dat het wordt opgeslagen in het geheugen, kunt u gebruik maken van gastmodus.

Wanneer u gastmodus gebruikt, wordt er niet gecontroleerd op atriumfibrilleren (AFib) en wordt de meting niet opgeslagen in het geheugen.

Als u een gastmeting wilt starten, houdt u het rechterpijltje van de pijltjestoets ingedrukt en drukt u gelijktijdig op de START / STOP knop. (Zie afbeelding hieronder)

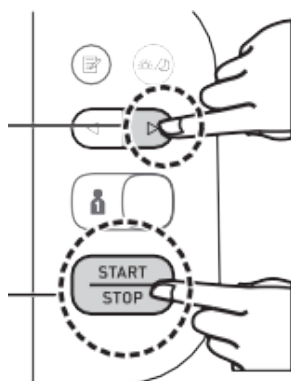

De bloeddrukmeter begint dan met meten. Als de meting klaar is, zullen de resultaten van de gastmeting op het scherm worden getoond.

## 6. Uitleg scherm en symbolen

Er zijn tegenwoordig veel verschillende modellen bloeddrukmeters. Je hebt de eenvoudige bloeddrukmeters die enkel de bloeddruk en de hartslag meten, maar je hebt ook de meer geavanceerde modellen, die naast de bloeddruk nog vele andere mogelijkheden hebben. Al deze functies worden vaak weergegeven op het scherm met symbolen en getallen. In dit hoofdstuk zal worden uitgelegd hoe je de bloeddruk moet aflezen en wat de symbolen precies betekenen.

### 6.1 Bloeddruk, hartslag, datum en tijd

Het belangrijkste van een bloeddrukmeter is uiteraard de bloeddruk, maar ook de hartslag. Veel bloeddrukmeters tonen ook de hartslag, aangezien beide een sterke relatie met elkaar hebben en veel samenwerken. De bloeddruk wordt gemeten in millimeters kwikdruk, mmHg. De bloeddruk bestaat uit twee waarden, zoals 130/80; dit wordt uitgesproken als "130 over 80".


- De eerste waarde is de 'bovendruk' of systolische bloeddruk, de maximumdruk in het bloed als uw hart slaat en het bloed in uw lichaam rondpompt. Dit is altijd de hoogste bloeddrukwaarde en in het scherm het bovenste getal waar "**SYS**" voor staat.
- De tweede waarde is de 'onderdruk' of diastolische bloeddruk, het minimumniveau van de druk in het bloed tussen de hartslagen in, wanneer het hart zich ontspant en met bloed vult. Dit is altijd de laagste bloeddrukwaarde en in het scherm het middelste getal waar "**DIA**" voor staat.
- Ook toont de bloeddrukmeter de hartslag. Dit is het onderste getal waar "**PULSE**" voor staat.



Bij elke meting wordt ook de datum en tijd van de meting opgeslagen. Zo kunt u precies zien, wanneer en op welk tijdstip u een bepaalde bloeddrukwaarde had.



## 6.2 Symbolen

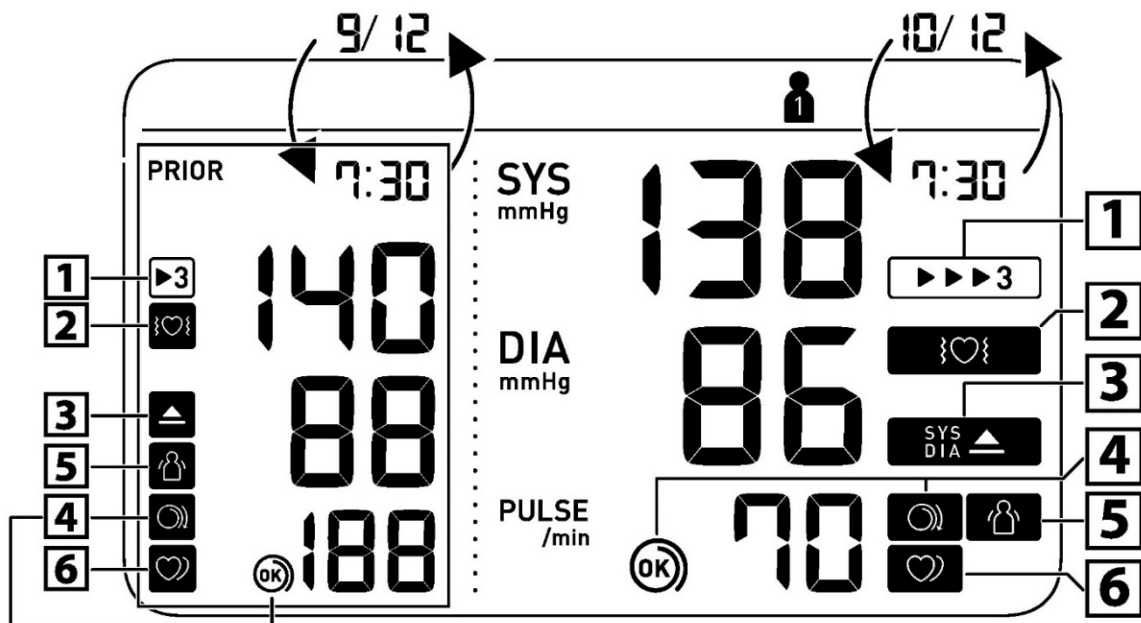Naast de bloeddruk en hartslag heeft deze bloeddrukmeter nog een aantal andere functies, die op het scherm met symbolen worden weergegeven. (Zie onderstaande afbeelding en uitleg)



1. Verschijnt wanneer de meting in AFib-modus is uitgevoerd.
2. Verschijnt als er atriumfibrillatie (AFib) is gedetecteerd tijdens de AFib-modusmeting. Als dit blijft verschijnen raden we u aan om contact op te nemen met uw (huis)arts en zijn of haar aanwijzingen op te volgen.
3. Verschijnt als "SYS" 135 mmHg of hoger is en/of "DIA" 85 mmHg of hoger is.
4.  De manchet zit strak genoeg.  Breng de manchet strakker aan.
5. Verschijnt wanneer uw lichaam tijdens een meting beweegt. Verwijder de armmanchet, wacht 2-3 minuten en probeer het opnieuw. (Het verschijnt niet wanneer de mogelijkheid op Afib is gedetecteerd tijdens de Afib-modusmeting)
6. Verschijnt wanneer tijdens een meting een onregelmatig ritme wordt gedetecteerd. Neem contact op met uw (huis)arts als dit symbool blijft verschijnen. (Het verschijnt niet tijdens een AFib-modusmeting)


## 6.3 Vergelijkingsmodus

De linkerkant van het scherm is bedoeld voor de vergelijkingsmodus. Aan deze kant van het scherm staan eerdere bloeddrukmetingen ("PRIOR") inclusief symbolen en het tijdstip van de meting. Zo kunt u niet alleen uw huidige meting met eerdere metingen vergelijken, maar kunt u ook de ochtend- en avondmetingen met elkaar vergelijken.

## 7. Bluetooth

De M7 Intelli IT en de X7 Smart zijn uitgerust met bluetooth. Hiermee kan er verbinding worden gemaakt met de Omron Connect app en kunt u uw meetresultaten synchroniseren met uw smartphone.

Standaard is bluetooth ingeschakeld. Wilt u deze uitschakelen, dan kan dit door op de achterzijde van het apparaat op de bluetoothknop te drukken. (Zie onderstaande afbeelding)

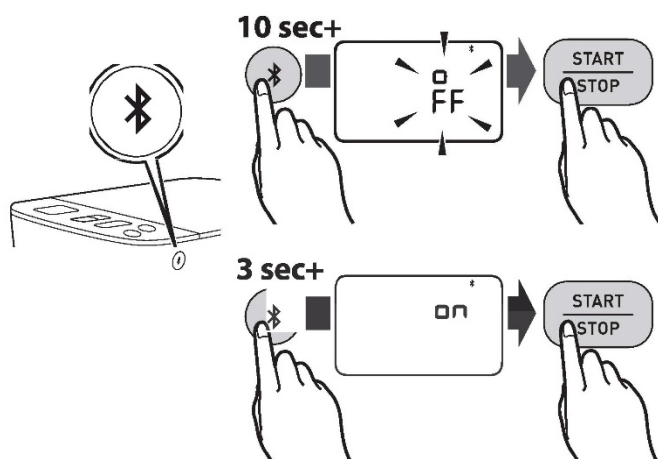

Als u bluetooth wilt uitschakelen, druk dan ongeveer 10 seconden op de bluetoothknop tot “OFF” op het scherm verschijnt. Druk vervolgens op de START/STOP knop om dit te bevestigen.

Als u bluetooth weer wilt inschakelen, druk dan ongeveer 3 seconden op de bluetoothknop tot “ON” op het scherm verschijnt. Druk vervolgens op de START/STOP knop om dit te bevestigen.