






4. Overige instellingen


4.1 De standaardinstellingen van uw meter herstellen

Als u alle in de meter opgeslagen gegevens wilt verwijderen, volgt u de onderstaande instructies. Controleer of de meter is uitgeschakeld.

- Houd de knop  ingedrukt en houd tegelijkertijd de knop [START/STOP] langer dan 2 seconden ingedrukt. Het volgende scherm knippert.

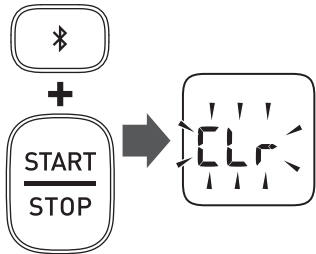

- Houd de knop  ingedrukt en houd tegelijkertijd de knop [START/STOP] langer dan 2 seconden ingedrukt.


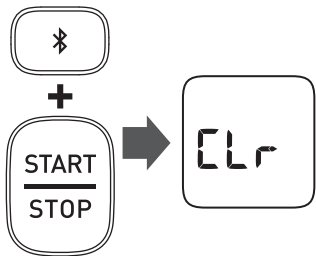


Opmerking

- Door het op de standaardinstelling terugzetten van de meter wordt de informatie in de app niet verwijderd.
- De meter schakelt na 3 seconden automatisch uit.
- Als u de meter opnieuw wilt gebruiken, moet u de meter opnieuw koppelen. Zonder nieuwe koppeling worden de meetresultaten niet naar de app verzonden.

5. Foutmeldingen en problemen oplossen

Als er sprake is van problemen tijdens de meting, moet u eerst controleren of er zich geen ander elektrisch apparaat binnen 30 cm van de meter bevindt. Als het probleem blijft bestaan, kunt u onderstaande tabel raadplegen.
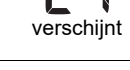
| Scherf/<br>probleem                                                                                                              | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                           | Oplossing                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>verschijnt of de polsmanchet pompt niet op. | De polsmanchet is niet juist aangebracht.                                                                                                                   | Breng de polsmanchet correct aan en verricht dan een nieuwe meting. Zie paragraaf 2.3.                                                                                                          |
|                                                                                                                                  | Er lekt lucht uit de polsmanchet.                                                                                                                           | Neem contact op met de OMRON-verkoper of -distributeur.                                                                                                                                         |
| <br>verschijnt                                 | De polsmanchet wordt teveel opgepompt tot boven 300 mmHg.                                                                                                   | Raak de polsmanchet tijdens de meting niet aan.                                                                                                                                                 |
| <br>verschijnt                                 | U praat of beweegt tijdens een meting. Trillingen verstoren een meting.                                                                                     | Praat en beweeg niet tijdens een meting.                                                                                                                                                        |
| <br>verschijnt                                 | De hartslag wordt niet correct gedetecteerd.                                                                                                                | Breng de polsmanchet correct aan en verricht dan een nieuwe meting. Zie paragraaf 2.3.                                                                                                          |
| <br>verschijnt                                 |                                                                                                                                                             | Praat en beweeg niet tijdens een meting.                                                                                                                                                        |
| <br>verschijnt                                 |                                                                                                                                                             | Als het symbool '  ' blijft verschijnen, raden we u aan contact op te nemen met uw arts.                     |
| <br>verschijnt                                 | Er is een storing in de meter opgetreden.                                                                                                                   | Druk nogmaals op de knop [START/STOP]. Als 'Er' blijft verschijnen, neem dan contact op met de OMRON-verkoper of -distributeur.                                                                 |
| <br>verschijnt                                 | De meter kan geen verbinding maken met een Smart-apparaat of kan gegevens niet correct verzenden.                                                           | Volg onderstaande instructies in de app 'OMRON connect'. Als na het controleren van de app het symbool 'Err' nog steeds verschijnt, neem dan contact op met de OMRON-verkoper of -distributeur. |
| <br>knippert                                   | De knop  wordt ingedrukt gehouden om te koppelen met een Smart-apparaat. | Knippert tijdens het koppelen met het Smart-apparaat. Ga naar de paragraaf 'Help' in de app 'OMRON connect' voor het koppelen.                                                                  |
| <br>knippert                                   | De knop  moet worden ingedrukt om de meetresultaten te verzenden.        | Knippert tijdens het verzenden van de meetresultaten naar de app 'OMRON connect'.                                                                                                               |

| Scherf/<br>probleem                                                                                                                                         | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oplossing                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>knippert                                                               | Meer dan 24 meetresultaten worden niet verzonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maak een koppeling met of verzend de meetresultaten naar de app 'OMRON connect', zodat u ze in het geheugen van de app kunt bewaren. Daarna verdwijnt dit foutsymbool. |
|                                                                                                                                                             | Uw meter is niet gekoppeld aan of verbonden met uw Smart-apparaat.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
| <br>verschijnt                                                             | 30 meetresultaten worden niet verzonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |
| <br>knippert                                                               | De batterijen zijn bijna leeg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geadviseerd wordt de batterijen te vervangen door 2 nieuwe alkalinebatterijen. Zie paragraaf 2.1.                                                                      |
| <br>verschijnt of de meter werd tijdens de meting onverwacht uitgeschakeld | De batterijen zijn leeg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vervang de batterijen onmiddellijk door 2 nieuwe alkalinebatterijen. Zie paragraaf 2.1.                                                                                |
|                                                                                                                                                             | De batterijen zijn helemaal leeg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
| Geen voeding. Het scherm van de meter blijft leeg.                                                                                                          | De batterijen zijn niet correct geplaatst.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. Zie paragraaf 2.1.                                                                                                 |
|                                                                                                                                                             | De batterijen zijn niet correct geplaatst.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| De meetresultaten lijken te hoog of te laag.                                                                                                                | De bloeddruk varieert voortdurend. De bloeddruk kan worden beïnvloed door vele factoren, zoals stress, het tijdstip en/of hoe de polsmanchet wordt aangebracht. Zie de paragrafen 2.3 - 2.5 en hoofdstuk 3.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
| Er is sprake van andere problemen.                                                                                                                          | Druk op de knop [START/STOP] om de meter uit te schakelen. Druk nogmaals op de knop om een meting te verrichten. Als het probleem blijft bestaan, verwijder dan de batterijen en wacht 30 seconden. Plaats vervolgens de batterijen terug. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de OMRON-verkoper of -distributeur. |                                                                                                                                                                        |

6. Onderhoud

6.1 Onderhoud

Volg onderstaande aanwijzingen om te voorkomen dat de meter beschadigd raakt:

- Wijzigingen of modificaties die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, maken de garantie ongeldig.

 Pas op

- Haal het apparaat of de componenten NIET los of uit elkaar en probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dit kan namelijk een onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.

6.2 Opslag

- Bewaar de meter in de opbergetui als hij niet wordt gebruikt.
- Bewaar de meter op een schone en veilige locatie. Berg de meter niet op:
  - Als de meter nat is.
  - Op locaties die zijn blootgesteld aan extreme temperaturen, vochtigheid, direct zonlicht, stof of bijtende dampen, zoals bleekmiddel.
  - Op locaties die zijn blootgesteld aan trillingen of schokken.

6.3 Schoonmaken

- Gebruik geen schurende of vluchtige reinigingsmiddelen.
- Gebruik een zachte, droge doek of een zachte doek die is bevochtigd met een neutrale zeep om de meter en polsmanchet te reinigen. Neem ze daarna af met een droge doek.
- De meter en polsmanchet mogen niet in water worden gewassen of worden ondergedompeld.
- Gebruik geen benzine, verduuners of vergelijkbare oplosmiddelen om de meter en de manchet te reinigen.

6.4 Kalibratie en onderhoud

- De nauwkeurigheid van deze bloeddrukmeter is zorgvuldig getest en de meter is ontworpen voor een lange levensduur.
- Het wordt algemeen aanbevolen de meter elke twee jaar te laten controleren op juiste werking en nauwkeurigheid. Raadpleeg de erkende OMRON-verkoper of de klantenservice van OMRON via het op de verpakking of in de bijgevoegde informatie vermelde adres.

7. Specificaties

|                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productcategorie                                | Elektronische sfigymomanometers                                                             |
| Productbeschrijving                             | Automatische polsbloeddrukmeter                                                             |
| Model (code)                                    | RS3 Intelli IT (HEM-6161T-E)                                                                |
| Scherf                                          | Digitaal LCD-scherf                                                                         |
| Manchetdrukgebied                               | 0 tot 299 mmHg                                                                              |
| Bloeddrukmeetgebied                             | SYS: 60 tot 260 mmHg                                                                        |
|                                                 | DIA: 40 tot 215 mmHg                                                                        |
| Hartslagmeetgebied                              | 40 tot 180 slagen/min.                                                                      |
| Nauwkeurigheid                                  | Druk: ± 3 mmHg                                                                              |
|                                                 | Hartslag: ±5% van de weergegeven waarde                                                     |
| Oppompen                                        | Automatisch via elektrische pomp                                                            |
| Ontluchting                                     | Automatische snelle ontluchting                                                             |
| Meetmethode                                     | Oscillometrische methode                                                                    |
| Overdrachtsmethode                              | <b>Bluetooth®</b> low energy-technologie                                                    |
| Draadloze communicatie                          | Frequentiebereik: 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz)                                               |
|                                                 | Modulatie: GFSK                                                                             |
| Bedrijfsmodus                                   | Effectief uitgestraalde energie: < 20 dBm                                                   |
|                                                 | Doorlopende werking                                                                         |
| IP-classificatie                                | IP 22                                                                                       |
| Vermogen                                        | DC3 V 3,0 W                                                                                 |
| Stroomvoorziening                               | 2 'AAA'-alkalinebatterijen van 1,5 V                                                        |
| Levensduur batterij                             | Circa 300 metingen (met behulp van nieuwe alkalinebatterijen)                               |
| Levensduur                                      | 5 jaar                                                                                      |
| Omstandigheden tijdens bedrijf                  | +10 °C tot +40 °C / 15 tot 90% RV (niet-condenserend) / 800 tot 1.060 hPa                   |
| Omstandigheden tijdens opslag/transport         | -20 °C tot +60 °C / 10 tot 90% RV (niet-condenserend)                                       |
| Gewicht                                         | Circa 85 g zonder batterijen                                                                |
| Afmetingen                                      | Ongeveer 84 mm (b) × 62 mm (h) × 21 mm (l) (niet inclusief de polsmanchet)                  |
| Meetbare polsontrek                             | 13,5 tot 21,5 cm                                                                            |
| Geheugen                                        | Kan maximaal 30 meetresultaten opslaan                                                      |
| Inhoud                                          | Meter, 2 'AAA'-alkalinebatterijen, opbergetui, gebruiksaanwijzing, configuratie-instructies |
|                                                 |                                                                                             |
| Bescherming tegen elektrische schokken          | ME-apparaat met interne voeding                                                             |
| Toegepast onderdeel                             | Type BF (polsmanchet)                                                                       |
| Maximumtemperatuur van het toegepaste onderdeel | Lager dan + 48 °C                                                                           |

Opmerking

- Deze specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- In de klinische validatiestudie werd K9 gebruikt bij 85 personen voor het bepalen van de diastolische bloeddruk.
- Deze meter is klinisch onderzocht volgens de vereisten van EN ISO 81060-2:2014.
- IP-classificatie is de mate van bescherming die de behuizing biedt in overeenstemming met IEC 60529. Deze meter is beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter, zoals een vinger, en tegen schuin vallende waterdruppels die tijdens normaal gebruik problemen zouden kunnen veroorzaken.
- Dit apparaat is niet gevalideerd voor gebruik bij zwangere patiënten.

Informatie over verstoring van draadloze communicatie

Dit product maakt gebruik van de niet-gelicentieerde ISM-band op 2,4 GHz. In het geval het product wordt gebruikt in de nabijheid van andere draadloze apparatuur, zoals microgolf en draadloze LAN, die op dezelfde frequentie actief zijn als dit product, dan bestaat er kans op interferentie.

Als er sprake is van interferentie, moet het gebruik van de andere apparaten worden gestopt of moet dit product uit de buurt van andere draadloze apparatuur worden geplaatst alvorens het opnieuw te gebruiken.

8. Beperkte garantie

Dank u voor de aanschaf van een OMRON-product. Dit product is vervaardigd van hoogwaardige materialen en er is veel zorg besteed aan de fabricage ervan. Het is ontworpen voor optimale gebruiksvriendelijkheid, mits het juist wordt gebruikt en onderhouden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Dit product wordt door OMRON gegarandeerd voor een periode van 3 jaar vanaf de aankoopdatum. De juiste constructie, afwerking en materialen van dit product worden gegarandeerd door OMRON. Tijdens deze garantieperiode zal OMRON zonder kosten voor arbeid of onderdelen, het defecte product of de defecte onderdelen repareren of vervangen. De garantie geldt niet voor het volgende:

- Transportkosten en risico's van transport.
- Kosten voor reparaties en/of defecten als gevolg van reparaties door niet-erkende personen.
- Periodieke controles en onderhoud.
- Storingen in of slijtage van optionele onderdelen of andere hulpstukken buiten het hoofdapparaat zelf, tenzij hierboven expliciet gegarandeerd.
- Kosten als gevolg van het niet accepteren van een claim (deze worden in rekening gebracht).
- Schade van welke aard dan ook, inclusief persoonlijke schade, als gevolg van een ongeval of misbruik.
- Kalibratieservice valt niet onder de garantie.

Als garantieonderhoud nodig is, gaat u naar de dealer waar het product is aangeschaft of naar een erkende OMRON-distributeur. Raadpleeg de productverpakking/-informatie of de gespecialiseerde verkoper voor het adres. Als u moeite hebt om een OMRON-klantenservice te vinden, neemt u contact met ons op voor informatie. [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com)

Reparatie of vervanging onder de garantie vormt geen aanleiding voor enige uitbreiding of verlenging van de garantieperiode. De garantie wordt alleen verleend als het volledige product wordt geretourneerd, samen met de originele factuur/aankoopbon die aan de consument is overhandigd door de verkoper.

9. Richtlijnen en Verklaring van de fabrikant

CE 0197

- Dit apparaat voldoet aan de voorwaarden van EC-richtlijn 93/42/EEC betreffende medische hulpmiddelen.
- Deze bloeddrukmeter is ontworpen volgens de Europese norm EN1060, Niet-invasieve sfigymomanometers deel 1: Algemene vereisten en deel 3: Aanvullende vereisten voor elektromechanische bloeddrukmeetsystemen.
- Hierbij verklaart OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type HEM-6161T-E voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com)
- Dit OMRON-product is vervaardigd conform het strenge kwaliteitssysteem van OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan. Het hoofdcomponent voor OMRON-bloeddrukmeters, de druksensor, wordt geproduceerd in Japan.

| Beschrijving van symbolen                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Toegepast onderdeel - type BF Beschermingsgraad tegen elektrische schokken (lekstroom)                                                                                                                                                                                                                               |
| IP XX                                                                                 | Binnendringingsbeschermingsgraad voorzien door IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CE                                                                                    | CE-merkteken                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SN                                                                                    | Serienummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Temperatuurgrenzing                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Vochtigheidsbegrenzing                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Luchtdrukbegrenzing                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Om in het algemeen verhoogde potentieel gevaarlijke niveaus van niet-ioniserende straling aan te geven of om apparatuur of systemen aan te geven, bijvoorbeeld in de medische elektrische omgeving, die RF-zenders bevatten of die opzettelijk elektromagnetische RF-energie toepassen voor diagnose of behandeling. |
|   | Noodzaak voor de gebruiker om deze gebruiksaanwijzing te raadplegen.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Duidt de correcte positie van de meter op de pols aan Meetbare polsontrek 13,5-21,5 cm                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Batterij                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Gelijkstroom                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

HEM-6161T-E gefabriceerd door OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. voldoet aan de norm EN60601-1-2:2015 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Aanvullende documentatie in navolging van deze EMC-norm is beschikbaar op [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com). Raadpleeg de EMC-informatie voor HEM-6161T-E op de website.

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het aan het einde van de levensduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvoer van afval te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. |  |
| Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.                                                 |  |

 Bluetooth® Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik hiervan door OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. geschiedt onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaren.

App Store en het App Store logo zijn dienstmerken van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen. iPhone is een handelsmerk van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen. Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikant                   |  <b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b><br>53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vertegenwoordiging in de EU | <b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b><br>Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLAND<br><a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Productie-faciliteit        | <b>OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.</b><br>No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dochterondernemingen        | <b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b><br>Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK<br><a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a><br><br><b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b><br>Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, DUITSLAND<br><a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a><br><br><b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b><br>14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANKRIJK<br><a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a> |